

## INSTRUÇÕES DE USO

### PICO – SISTEMA DE TERAPIA DE PRESSÃO NEGATIVA DE FERIDAS DE USO ÚNICO



PICO - Sistema de Terapia de Pressão Negativa de Feridas é fornecido estéril, de uso único. Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada.

#### 1. Descrição

PICO - Sistema de Terapia de Pressão Negativa de Feridas de Uso Único é constituído por uma bomba e por dois conjuntos de curativos estéreis. A bomba PICO mantém a terapia de feridas por pressão negativa (TFPN) a 80 mmHg (nominal) na superfície da ferida.

O exsudado é controlado pelo curativo mediante uma combinação de absorção e evaporação da umidade através da película externa.

PICO é indicado para uso em tamanhos de feridas (área de superfície x profundidade) de até 400 cm<sup>3</sup>, consideradas como sendo pouco ou moderadamente exsudativas.

#### 2. Instruções de Uso

PICO - Sistema de Terapia de Pressão Negativa de Feridas de Uso Único é indicado para pacientes que se beneficiarão de um dispositivo de aspiração (terapia de pressão negativa de feridas) que estimula a cicatrização das feridas através da remoção de níveis baixos a moderados de exsudado e de materiais infecciosos.

Os exemplos de tipos apropriados de feridas incluem:

- Crônica
- Aguda
- Traumática
- Feridas subagudas e deiscências
- Queimaduras de espessura parcial
- Úlceras (diabéticas ou de pressão)
- Retalhos e enxertos
- Locais de incisão encerrados

**O sistema de terapia de feridas por pressão negativa de uso único PICO é apropriado para uso tanto num ambiente hospitalar como em um ambiente domiciliar.**

### **3. Contraindicações**

A utilização do PICO é contraindicada na presença de:

- Pacientes com neoplasia maligna no leito ou nos bordos da ferida (exceto em cuidados paliativos para melhorar a qualidade de vida).
- Osteomielite anteriormente confirmada e não tratada.
- Fístulas não entéricas e não exploradas.
- Tecido necrótico com escara presente.
- Artérias, veias, nervos ou órgãos expostos.
- Locais anastomóticos.
- Aspiração de emergências das vias aéreas.
- Drenagem torácica, mediastínica ou pleural por um tubo.
- Aspiração cirúrgica.

### **4. Advertências**

- Pacientes de alto risco com complicações hemorrágicas que não forem controladas podem ser potencialmente fatais. Os pacientes devem ser frequentemente monitorizados para sinais de hemorragia. No caso de se observar uma hemorragia súbita ou de maior intensidade, descontinuar imediatamente a terapia, deixar o curativo colocado, tomar as medidas apropriadas para parar a hemorragia e obter assistência médica imediata.
- A utilização de anticoagulantes não torna um paciente inapropriado para tratamento com PICO; contudo, deve se efetuar a hemostase antes da aplicação do curativo. Pacientes que apresentem uma hemostase difícil ou que estejam medicados com terapia anticoagulante correm risco de hemorragias.
- Durante o tratamento, evitar a utilização de hemostáticos que podem aumentar o risco de hemorragia se for interrompidos. Deve se efetuar uma avaliação frequente e constante durante toda a terapia.
- Deve se tomar cuidado para assegurar que a bomba e o tubo não:
  - ✓ Estejam colocados em uma posição que possam causar lesão por pressão no paciente.
  - ✓ Estejam estendidos pelo chão onde pode haver o risco de tropeçar ou de ficar contaminados.
  - ✓ Apresentem um risco de estrangulamento ou torniquete para os pacientes.
  - ✓ Estejam ou passem por uma fonte de calor.
  - ✓ Estejam torcidos ou presos sob o vestuário ou ligaduras de tal modo que possam bloquear a pressão negativa.
- Arestas cortantes ou fragmentos ósseos numa ferida devem ser cobertos ou removidos antes da utilização de PICO devido ao risco de perfuração de órgãos ou de vasos sanguíneos quando a ferida for submetida à pressão negativa.
- No caso de ser necessário efetuar uma desfibrilação, desligar a bomba do curativo antes da desfibrilação. Remover o curativo se este estiver posicionado num local onde irá interferir com a desfibrilação.
- Não é seguro em Ressonância Magnética (RM). PICO não é compatível com RM. Não levar o sistema PICO para uma sala de RM.
- **PICO não foi estudado em pacientes pediátricos.** O tamanho e o peso dos pacientes devem ser considerados ao prescrever-se esta terapia.
- PICO não é adequado para utilização em áreas onde existe o perigo de explosão (p. ex., unidade de oxigênio hiperbárico).
- PICO não é adequado para utilização na presença de uma mistura anestésica inflamável ou com oxigênio ou óxido nitroso.

## 5. Precauções

- Devem ser tomadas as seguintes precauções para os pacientes de alto risco de complicações hemorrágicas que:
  - ✓ Estão sob terapia de anticoagulantes ou inibidores da agregação plaquetária ou que têm uma hemorragia ativa.
  - ✓ Apresentam vasos sanguíneos enfraquecidos ou friáveis ou órgãos na ferida ou na sua proximidade, como resultado de, mas não limitado a: anastomoses, infecção, traumatismo ou radiação.
  - ✓ Apresentam uma hemostase difícil da ferida.
  - ✓ Mal nutridos.
  - ✓ Não aderem ao tratamento ou são agressivos.
  - ✓ Tenham feridas muito próximas de vasos sanguíneos ou de aponevroses delicadas.
- Os curativos só devem ser aplicados por um profissional de saúde. Os curativos não podem ser removidos ou mudados pelo paciente.
- Nos casos de feridas infetadas serão necessárias mudanças de curativo com maior frequência. Deve ser mantida a monitorização regular da ferida para verificar se existem sinais de infecção.
- Se considerado clinicamente apropriado, precauções devem ser tomadas para que a aplicação de um curativo circular não comprometa a circulação.
- **PICO não tem alarmes sonoros.** A bomba deve ser transportada de forma acessível e o paciente/profissional de saúde possa controlar regularmente o seu estado.
- Embora PICO possa ser utilizado sob vestuário/roupa da cama, é importante que não sejam aplicados materiais oclusivos como, por exemplo, curativos tipo película, sobre a zona almofadada do curativo porque pode alterar o desempenho do dispositivo.
- Nos casos em que PICO é utilizado em pacientes com pele frágil, deve utilizar um protetor de pele como SKINPREP™ nas zonas da pele onde serão aplicadas as tiras de fixação. A utilização inadequada ou repetida de tiras de fixação pode resultar em danos à pele.
- Se ocorrer vermelhidão ou sensibilização, interrompa a utilização e contate o profissional de saúde.
- Não utilize PICO com produtos à base de óleos, tais como petrolatum, pois podem comprometer o estabelecimento de um selamento eficaz.
- A utilização de pressão negativa apresenta um risco de crescimento tecidual no interior da espuma quando esta é utilizada para preenchimento da ferida. Quando utilizar preenchimento de espuma com PICO, o crescimento tecidual pode ser diminuído utilizando uma camada de contato com a ferida ou aumentando a frequência da mudança de curativos.
- PICO pode ser utilizado conjuntamente com drenos cirúrgicos desde que o curativo não seja colocado sobre o dreno no ponto por onde este sai da pele. Os drenos cirúrgicos devem ser dirigidos sob a pele afastando-os da borda do curativo e devem funcionar independentemente do sistema de terapia de pressão negativa de feridas de uso único PICO.
- Durante o banho de chuveiro, a bomba PICO deve ser desligada do curativo. Certifique-se de que a extremidade do tubo ligado ao curativo está voltada para baixo para que a água não entre na parte superior do tubo.
- Não desmonte a bomba.
- O curativo não deve ser utilizado com qualquer outro tipo de dispositivo de sucção.
- Não altere a forma do dreno, não cortar ou puxar.
- Não corte o curativo porque pode causar a perda da aplicação da TFPN.
- Certifique-se sempre de que o curativo seja posicionado no centro na ferida. A porta deve ser posicionada numa posição superior à ferida, sobre a pele intacta, e não se estenda sobre a ferida, para minimizar o risco de acúmulo de fluido em volta da porta e bloqueio potencial da pressão negativa.

- Tomografias computadorizadas e radiografias têm o potencial de interferir com alguns dispositivos médicos eletrônicos. Sempre que possível, afaste o dispositivo do alcance do aparelho de raios de X ou do scanner TC. Se o dispositivo esteve próximo a um destes aparelhos, verifique se está funcionando corretamente.
- **Este dispositivo é de uso único.** O uso de qualquer parte deste sistema em mais do que um paciente pode resultar em contaminação cruzada e pode causar infecções.
- Temperatura e umidade elevadas podem diminuir o tempo de uso dos curativos.
- Durante o transporte, existe a possibilidade de interferência de radiofrequência que pode afetar o desempenho de PICO. Se o dispositivo não funcionar corretamente, substitua as baterias. Se o problema não for corrigido, contate a Assistência Técnica. PICO não se destina a ser utilizado a bordo de aviões; as baterias devem ser retiradas durante viagens aéreas.
- O potencial de interferência eletromagnética em qualquer ambiente não pode ser eliminado. Tenha precaução se PICO estiver na proximidade de equipamento eletrônico como leitores de Identificação de radiofrequência (RFID - Radio Frequency Identification), equipamento ante roubo ou detectores de metal.

## 6. Reações adversas

A hemorragia excessiva é um risco grave associado à aplicação de sucção em feridas que pode resultar em morte ou lesão grave. É essencial uma seleção cuidadosa dos pacientes, de acordo com as contraindicações, advertências e precauções acima indicadas. Efetuar a monitorização cuidadosa da ferida e do curativo para detectar quaisquer sinais de uma alteração do estado do paciente com relação a perdas sanguíneas. Informar o profissional de saúde sobre alterações repentinas ou abruptas do volume ou da cor do exsudado.

## 7. Instruções de uso

### 7.1 Orientações sobre como determinar se a ferida é adequada para tratamento com PICO

PICO deve ser utilizado em feridas que se ajustam bem na zona almofadada do curativo, seguindo as precauções sobre o posicionamento da porta (em pele intacta e não se estendendo sobre a ferida).

Como norma de orientação:

- Profundidade - Feridas com uma profundidade superior a 0,5 cm necessitam provavelmente de um preenchimento de espuma ou gaze para a TFPN de modo a assegurar o tratamento adequado de toda a superfície das feridas. Geralmente, as feridas tratadas com tamanhos maiores pelo sistema PICO não devem ter mais de 2 cm de profundidade.
- Exsudado - Quando utilizado sobre uma ferida com exsudado moderado, a dimensão da ferida deve ser geralmente, não mais do que 25% da área almofadada do curativo.

### 7.2 Aplicação

1. Remova o excesso de pelos para assegurar a aproximação íntima do curativo à ferida. Se necessário, irrigue a ferida com solução salina estéril e seque a ferida suavemente.
2. Utilizando uma técnica limpa, descole a aba da película central e coloque o curativo centralmente na ferida para diminuir a possibilidade de fluido da ferida, entrar em contato com a porta.

A porta deve ser posicionada numa posição superior à ferida (dependendo da posição principal do paciente), colocada sobre a pele intacta e não se estendendo sobre a ferida para impedir que o fluido se acumule à volta da porta e bloqueie a pressão negativa.

Remova as outras duas abas e alise o curativo à volta da ferida para impedir a formação de dobras. Reposicionar se necessário para garantir que o rebordo não tem dobras.

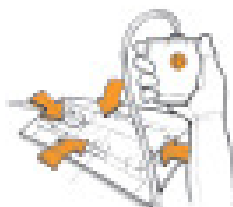


3. **Assim que o curativo estiver posicionado, tire a bomba e as baterias da bandeja. Introduza as baterias. Torne a colocar a tampa. Após isto, as três luzes piscam uma vez. (Consultar a Tabela 1).**

4. Ligue a bomba ao curativo girando os dois conectores. Aperte o botão laranja para iniciar a aplicação de pressão negativa. A luz verde começa a piscar (indica que o sistema está funcionando corretamente, ver a Tabela 1).

Dependendo do tamanho da ferida, a bomba deve demorar até 30 segundos para estabelecer a terapia de pressão negativa de feridas.

Se, após 30 segundos, o sistema não tiver estabelecido a terapia de feridas por pressão negativa, **o alarme de fuga de ar de cor âmbar acende-se**. Para a solução de problemas a Tabela 1.



5. Se utilizar SKIN PREP antes da aplicação das tiras de fixação (ver 5. Precauções) limpe a zona circundante ao curativo e deixe a pele secar.
6. Aplique as tiras de fixação em cada um dos quatro lados do curativo. Retire o suporte que está sobre a tira após cada uma ter sido aplicada. Estas tiras mantêm a selagem durante o tempo de utilização do curativo. Em locais difíceis, pode ser útil aplicar as tiras para ajudar a obter uma selagem antes de ligar a bomba. Coloque cada tira de modo a que fique sobreposta sobre a borda do curativo aproximadamente 1 cm. Certifique-se de que o tubo não esteja torcido ou preso na roupa.



Se as tiras de fixação forem removidas, o curativo também deve ser substituído.

### 7.3 Substituição de curativo

1. Os curativos devem ser substituídos normalmente em intervalos de 3 a 4 dias, de acordo com as orientações relativas ao tratamento de feridas. Poderão ser necessárias substituições de curativo mais frequentes dependendo do nível de exsudado, estado do curativo ou de outras considerações relativas ao paciente, por exemplo, quando PICO é utilizado em feridas infectadas. **Segundo o critério do profissional de saúde, um curativo PICO pode ficar colocado um período de até 7 dias.**

2. Inspeção regularmente o curativo. Se o curativo tiver que ser substituído, aperte o botão laranja e desligue o curativo da bomba. As tiras de fixação devem ser retiradas da pele e o curativo levantado num canto e descolado até ter sido completamente removido.

Aplique outro curativo como descrito no item 7.2, ligue a bomba e aperte o botão laranja para reiniciar a terapia.

3. Com base na frequência da substituição de curativo, será necessário um novo conjunto do sistema de terapia de pressão negativa de feridas de uso único PICO, dependendo de qual dos seguintes ocorrerem primeiro: **quando foram utilizados os dois curativos ou após 7 dias quando a bomba para automaticamente de funcionar (nesta altura, todas as luzes se apagarão).**
4. O curativo deve ser eliminado como resíduo clínico. As baterias devem ser retiradas da bomba e juntamente com a bomba eliminada de acordo com os regulamentos locais.

5. Para mais informações sobre as exigências relativas à eliminação ver: [www.mypico.com](http://www.mypico.com)

### 7.4 Uso com material de preenchimento e com camadas em contato com a ferida

PICO é compatível com os preenchimentos habituais de gaze e espuma utilizados na TFPN tradicional, nos casos em que é clinicamente apropriado, por exemplo, numa ferida aberta. Quando se utiliza um material de preenchimento, este e o curativo PICO devem ser mudados 2 a 3 vezes por semana, de acordo com o protocolo clínico local e as instruções do fabricante. A gaze deve preencher a superfície da ferida sem pressão. Evitar um preenchimento excessivo. Se necessário PICO pode ser utilizado por cima de uma camada não aderente, por exemplo, sobre um enxerto de pele.

Em feridas infectadas ou em risco de infeção, pode utilizar os curativos antimicrobianos ACTICOAT™ Flex por baixo do PICO.

PICO é compatível com terapia compressiva se clinicamente necessário, no entanto a ferida deve ser previamente e rigorosamente avaliada para garantir que o exsudado é de nível baixo a moderado. A aplicação ativa da TFPN numa ferida pode causar uma produção adicional de exsudado. Assim sendo, após a primeira aplicação de PICO sob um sistema compressivo, verifique o curativo PICO após 2 a 3 dias para ver se a formação do exsudado é aceitável ou se é necessária uma mudança do curativo e que é apropriado continuar com a terapia compressiva.

Quando se aplica terapia compressiva sobre PICO, assegurar que o tubo de ligação da bomba PICO e do curativo fica por cima da primeira camada e por baixo das camadas subsequentes para evitar que fique contra a pele. Se utilizar meias de compressão, coloque o tubo fora das meias. Para indicações de uma aplicação correta da terapia compressiva, verifique as instruções de aplicação do fabricante.

## 8. Uso geral

### 8.1 Ducha e banho

É permitida uma ducha de chuveiro rápida, no entanto, a bomba deve ser desligada (ver item 5. Precauções) e colocada num local seguro onde não fique molhada. O curativo não deve ser exposto a um jato direto ou imerso em água.

Certifique-se de que a extremidade do tubo ligado ao curativo esteja voltada para baixo para que a água não entre na parte superior do tubo.

### 8.2 Limpeza

A adesão às diretivas clínicas que respeite a higiene é de importância primordial. A bomba pode ser limpa com um pano úmido utilizando água com sabão ou uma solução desinfetante fraca.




## 9. Falhas e assistência técnica

Se o seu dispositivo desenvolver uma falha ou apresentar sinais de dano, consulte a Tabela 1.

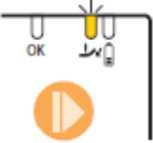

Tabela 1. Indicação do estado da bomba, alarmes e erros.

**PICO tem alarmes visuais para informar o usuário da presença de um problema. PICO não tem alarmes sonoros.** A bomba deve ser transportada de forma que esteja acessível e o paciente/profissional de saúde possa controlar regularmente o seu estado.

### Funcionamento Normal

Estado do visor	Estado das luzes	Causa possível	Comentários/solução de problemas
	Todas as luzes apagadas.	A bomba está desligada (OFF).  A bomba atingiu o fim da sua vida útil.  As pilhas não estão operacionais.	A terapia foi colocada em pausa. Premindo o botão laranja reinicia a terapia e a luz verde começa a piscar.  Após 7 dias de terapia, a bomba para automaticamente de funcionar, neste caso todas as luzes apagam-se. Ao premir o botão laranja não obtém uma luz verde intermitente.  Se a bomba tiver menos de 7 dias de uso, as pilhas podem não estar operacionais e devem ser substituídas como abaixo indicado.
	Todas as luzes piscam uma vez.	Isto indica o autoteste da bomba a partir do momento em que as pilhas foram introduzidas e a tampa foi novamente colocada.	Isto está previsto.
	Luz verde "OK" pisca.	O penso foi aplicado e todo o sistema está a funcionar corretamente.  Não existem problemas.	Pode ouvir-se a bomba a funcionar ocasionalmente enquanto mantém a pressão negativa. Isto é normal. Se ocorrer com frequência (várias vezes por hora) alise o penso para remover quaisquer dobras que possam deixar entrar ar no sistema. A TFPN está ainda a ser aplicada nesta situação.

## Alarmes e Falhas

Estado do visor	Estado das luzes	Causa possível	Comentários/solução de problemas
	Luz amarela de "fugas" pisca.	<p>É detetada uma fuga de ar possivelmente devida a uma dobra no penso/rebordo/tira.</p> <p>A bomba está em pausa automática. A TFPN não está a ser aplicada na ferida.</p> <p>A bomba faz uma pausa automática durante 1 hora e depois tentará restabelecer a terapia se não for tomada uma ação corretiva.</p>	<p>Alise o penso e as tiras para remover quaisquer dobras que possam deixar entrar ar no sistema.</p> <p>Pressione o botão laranja para iniciar a terapia. A luz verde "OK" pisca enquanto a bomba estiver a tentar estabelecer a terapia.</p> <p>Se a fuga de ar permanecer, a luz amarela de fugas começa a piscar após aproximadamente 30 segundos. Se isto acontecer, repita as ações de alisamento e prima o botão laranja. Se a fuga estiver resolvida a luz verde continuará a piscar.</p>
	<p>Luz verde "OK" pisca.</p> <p>Luz amarela de "pilha fraca" pisca.</p>	<p>O sistema está ligado e a funcionar corretamente.</p> <p>Potência da pilha baixa.</p>	<p>A mudança de pilhas é necessária em menos de 24 horas. Coloque a terapia em pausa premindo o botão laranja.</p> <p>Prima para abrir a tampa das pilhas situada na parte superior da bomba e remova as pilhas usadas. Introduza 2 pilhas novas de lítio AA (LR91). Recolocar a tampa. Pressione o botão laranja, a terapia será reiniciada e a luz verde começará a piscar.</p>
	<p>Luz amarela de "fugas" pisca.</p> <p>Luz amarela de "pilha fraca" pisca.</p>	<p>Dobras no penso/rebordo/tira.</p> <p>Potência da pilha baixa.</p>	<p>Resolva o problema da fuga de ar como acima indicado.</p> <p>A mudança de pilhas ou do dispositivo é necessária em menos de 24 horas, como acima indicado.</p>
	Todas as luzes estão continuamente acesas.	Falha da bomba. O sistema não pode ser utilizado.	Contacte o representante da S&N. Aplique nova bomba e penso.



## 10. Especificações

Dimensões máximas	85 x 85 x 25 mm
Peso	<120 g
Tempo de funcionamento	7 dias
Tipos de baterias	Lítio AA (L91)
Potência (pilha)	CC de 3V
Proteção contra entradas	IPX4
Vácuo máximo	100 mmHg
Modo de funcionamento	Contínuo
Proteção do Paciente	Tipo BF
Conservação/transporte	5 – 25°C, HR de 10 – 75% Pressão atmosférica de 700 a 1060 mbar
Ambiente de funcionamento	5 – 35°C, HR de 10 – 95% Pressão atmosférica de 700 a 1060 mbar
Em conformidade	UL 60601-1 IEC 60601-1 IEC 60601-1-2 CAN/CSA C22.2

## 11. Segurança e Compatibilidade Eletromagnética

Quando utilizado em conformidade com as instruções do fabricante, PICO está em conformidade com os requisitos gerais de segurança de equipamento médico elétrico segundo a norma IEC 60601-1 e com os requisitos de segurança eletromagnética de equipamento médico elétrico segundo a norma IEC 60601-1-2.

### Compatibilidade Eletromagnética

Este equipamento foi testado e verificou que se encontra em conformidade com os limites de dispositivos médicos segundo a norma IEC 60601-1-2-2004. Estes limites foram concebidos para proporcionar uma proteção razoável contra interferências eletromagnéticas típicas de instalações médicas e do ambiente domiciliário.

Equipamento de comunicação de RF móvel e portátil pode afetar o Equipamento Médico Elétrico. Este tipo de equipamento produz, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências nocivas noutros dispositivos situados na sua vizinhança. Contudo, não existe qualquer garantia de que não ocorram interferências numa instalação particular.

Para mais informações sobre imunidade eletromagnética e emissões eletromagnéticas ver: [www.mypico.com](http://www.mypico.com).

### Atenção

Este guia de usuário não constitui uma garantia. Serve apenas de orientação. Em caso de dúvidas médicas, por favor contate um médico.

O produto deve ser utilizado de acordo com este guia do usuário e com toda a rotulagem aplicável.

PICO é acondicionado no Reino Unido com componentes individuais fabricados nos seguintes países:

Curativo - Reino Unido

Tiras de fixação - Bélgica

Bomba - China

Baterias - Origem como indicado.

## 12. Variantes do sistema

Estão disponíveis 8 tamanhos de curativos em conjuntos que contêm 2 curativos, 1 bomba e tiras de fixação secundária:

Quantidade / Caixa

Curativos		Tiras de Fixação		Bomba		Bateria
Qtd	Dimensões (cm)	Qtd	Dimensões (cm)	Qtd	Dimensões (mm)	Qtd
2	10 x 20	10	5 x 20 e 5 x 25	1	85 x 85 x 25	2
2	10 x 30	14	5 x 20 e 5 x 20	1	85 x 85 x 25	2
2	10 x 40	14	5 x 20 e 5 x 25	1	85 x 85 x 25	2
2	15 x 15	10	5 x 25 e 5 x 25	1	85 x 85 x 25	2
2	15 x 20	10	5 x 25 e 5 x 25	1	85 x 85 x 25	2
2	15 x 30	14	5 x 20 e 5 x 25	1	85 x 85 x 25	2
2	20 x 20	10	5 x 25 e 5 x 25	1	85 x 85 x 25	2
2	25 x 25	10	5 x 30 e 5 x 30	1	85 x 85 x 25	2

## Bolsa para transporte




















A bomba pode ser transportada no bolso do paciente.

Como alternativa também está disponível um bolsa para transportar a bomba.

Este pode ser encomendado utilizando o seguinte código:

Bolsa para transporte PICO 66800918

### 13. GLOSSÁRIO DE SÍMBOLOS

	Classificação do equipamento: Parte aplicada com isolamento tipo BF		Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada
	Utilização Única. Não reutilizar		Mantenha o produto afastado da luz solar
	Fabricante		Alerta de fugas
	Classificação Internacional		Data de fabrico
	Mantenha seco		Produto esterilizado com óxido de etileno
	Número de lote		Indicação da energia das pilhas
	UE: não eliminar no lixo comum		A bomba está a funcionar corretamente
	Temperatura de armazenamento		Precaução: A lei federal americana limita a venda deste dispositivo por um médico ou por prescrição de um médico.
	Marcação CE		Início/pausa/continuar a terapia
	Atenção: ver as instruções de utilização		

“PRODUTO ESTÉRIL DE USO ÚNICO”  
“FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO”

Produzido por Smith & Nephew Medical  
Limited  
101 Hesse Road  
Hull – HU3 2BN - Inglaterra

Data de Fabricação / N° de Série:  
Garantia: 1 ano  
Cadastro na ANVISA nº: 10178010255

Importado e distribuído por:  
POLITEC Importação e Comércio Ltda.  
Al. Araguacema, 138 – Tamboré  
CEP: 06460-070 - Barueri / SP  
Tel.: (11) 4195-6001 Fax : (11) 4195-8177  
CNPJ: 43.894.609/0001-64

Responsável Técnico: Ellen Penteado da Costa  
CRF-SP: 36185

#### Quantidade / Caixa

Códigos	Curativos		Tiras de Fixação		Bomba		Bateria
	Qtd	Dimensões (cm)	Qtd	Dimensões (cm)	Qtd	Dimensões (mm)	Qtd
66800951	2	10 x 20	10	5 x 20 e 5 x 25	1	85 x 85 x 25	2
66800952	2	10 x 30	14	5 x 20 e 5 x 20	1	85 x 85 x 25	2
66800953	2	10 x 40	14	5 x 20 e 5 x 25	1	85 x 85 x 25	2
66800954	2	15 x 15	10	5 x 25 e 5 x 25	1	85 x 85 x 25	2
66800955	2	15 x 20	10	5 x 25 e 5 x 25	1	85 x 85 x 25	2
66800956	2	15 x 30	14	5 x 20 e 5 x 25	1	85 x 85 x 25	2
66800957	2	20 x 20	10	5 x 25 e 5 x 25	1	85 x 85 x 25	2
66800958	2	25 x 25	10	5 x 30 e 5 x 30	1	85 x 85 x 25	2